

JAK ZPRACOVÁVÁME ZÁPŮJČNÍ SÍTA NA CS VE FN BRNO

Dagmar Ježková

FN Brno

Zápůjční síta

1. krátkodobě zapůjčená sada instrumentária
2. zapůjčená sada na delší dobu /půl roku, rok/

Nejčastější důvody:

- nákup sady příliš drahý pro ZZ /síta kolují celou republikou/
- nabídka od firmy na vyzkoušení a případné zakoupení

ZPRACOVÁNÍ NA CS

1. Příjem čisté sady před operací – pouze sterilizace
2. Příjem použitého instrumentárium po oper. výkonu

Žádanka o sterilizaci – specifikace procesů

- pouze dekontaminace a mytí
- kompletní předsterilizační příprava vč. sterilizace

POTVRZENÍ O DEKONTAMINACI

Dokument „Potvrzení o dekontaminaci“ – jen od některých firem

- kopie zůstává na CS
- originál vracíme zpět na COS s instrumentáři



Vyplňte prosím kompletně tento dokument vždy, když vracíte zápůjční set!

POTVRZENÍ O DEKONTAMINACI

Instrumentárium: 2 AP-100

Identifikační číslo:

Označte „X“ odpovídající možnost.

☐ Nebylo použito při operačním výkonu anebo nebylo v kontaktu s krví, kostí anebo jinými tělními tekutinami, plyny anebo patologickými vzorky.

☒ Bylo v kontaktu s krví, kostí anebo jinými tělními tekutinami. Instrumentárium bylo po použití úplně dekontaminováno následujícím způsobem:

☒ Umytí a Dezinfekce v automatické myčce

☐ Umytí a Dezinfekce ručně

Poznámka: Pokud bylo instrumentárium umyté a dezinfikované pouze ručně, musí být před odesláním zpět sterilizované!

☒ Sterilizace

Potvrzuji, že jsem provedl/a všechny odpovídající kroky k zajištění přesnosti uvedených údajů, a že instrumentárium uvedené výše bylo správně připraveno pro bezpečnou manipulaci/přepravu.

Nemocnice:	<u>FN BRNO</u>
Jméno a příjmení:	<u>Petr Kozubek</u>
Datum:	<u>18. 1. 21</u>
Podpis:	<u>[Signature]</u>

KONEC DOKUMENTU

TV-FRM-16304



Fénix Brno, spol. s r. o., Vackova 79, 612 00 BRNO, Česká republika

POTVRZENÍ O DEKONTAMINACI

Instrumentárium (název / označení): HBS 2

Číslo ZP protokolu: ZP 12210070

Označte „X“ odpovídající možnost (možnosti):

Instrumentárium vč. všech zásobníků, košů a nesterilně ložených implantátů

☐ nebylo použito při operačním výkonu nebo nebylo v kontaktu s krví, kostí nebo jinými tělními tkáněmi, tekutinami, plyny nebo patologickými vzorky.

☒ bylo v kontaktu s krví, kostí nebo jinými tělními tkáněmi, tekutinami, plyny nebo patologickými vzorky. Po použití tedy bylo plně dekontaminováno následujícím způsobem:

☐ dekontaminační roztok

☒ mytí a dezinfekce v automatické myčce:

Přístroj č.: H Cyklus č.: 16012 Datum: 29. 7. 21

☐ mytí a dezinfekce ručně

Poznámka: Pokud bylo instrumentárium mytí a dezinfikováno pouze ručně, musí být před odesláním sterilizováno!

☒ sterilizace

Přístroj č.: L Cyklus č.: 29.025 Datum: 29. 7. 21

Potvrzuji, že jsem učinil/a všechny odpovídající kroky k zajištění přesnosti uvedených údajů a že instrumentárium včetně všech jeho zásobníků, košů a implantátů uvedené výše bylo vhodně připraveno pro bezpečnou manipulaci a přepravu.

Podpis:	<u>[Signature]</u>
Jméno a příjmení:	<u>Petr Kozubek</u>
Pozice:	<u>st. asistent</u>
Nemocnice:	<u>FN BRNO</u>
Datum zápisu:	<u>29. 7. 21</u>

Den zápisu do OR: 30. prosince 1991, Spisová značka: oddíl C, složka 4020

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Vackova 79, 612 00 Brno
Tel: +420 541 218 129 - 130
Fax: +420 541 214 040
e-mail: fenix@fenix.cz

IČO: 44 95 18 83
DIČ: CZ 44 95 18 83
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 1550742 - 021 / 0100
http://www.fenix.cz

POBOČKA MLADÁ BOLESLAV
Těšnovská 945, 293 06 Kozmonosy
Tel: +420 325 721 190, 325 724 114
Fax: +420 325 724 115
e-mail: fenixb@fenix.cz

PŘÍJEM PO OPERAČNÍM VÝKONU



DEKONTAMINACE A MYTÍ V AUTOMATICKÝCH MYCÍCH PŘÍSTROJÍCH

Mycí proces včetně sušení

Ruční předmytí např. dutých ZP

Teplota 93°C

Čas cca 1,5 hodiny

Čisticí prostředky dle doporučení
výrobce myček – řada Neodisher




SETOVÁNÍ


Kontrola nástrojů – čistota, funkčnost, poškození

Setace instrumentária

- dle seznamu dodaného firmou
- bez seznamu / libovolně nebo dle nákresu na sítě/

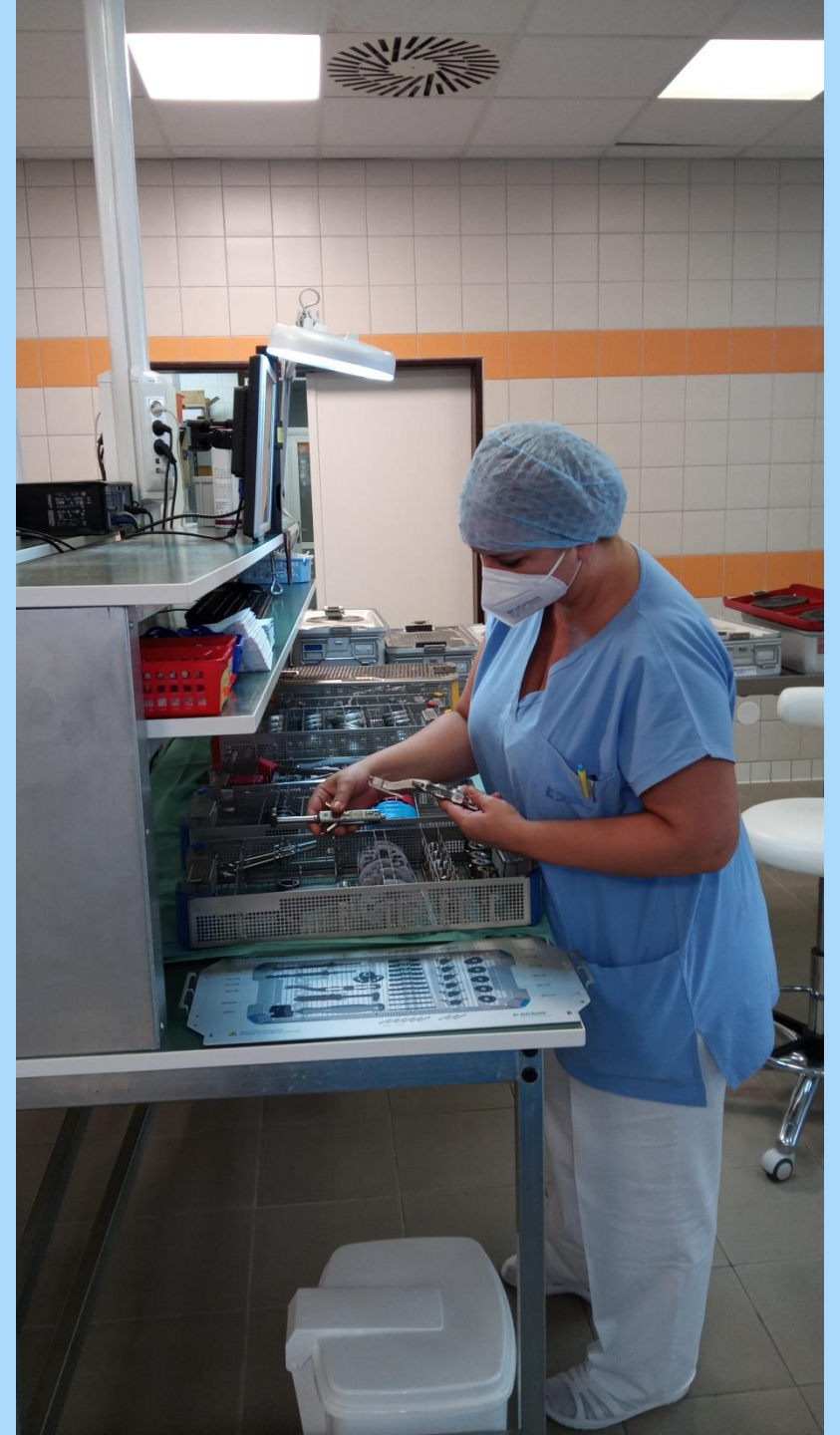

ULOŽENÍ NÁSTROJŮ DLE OBRÁZKU

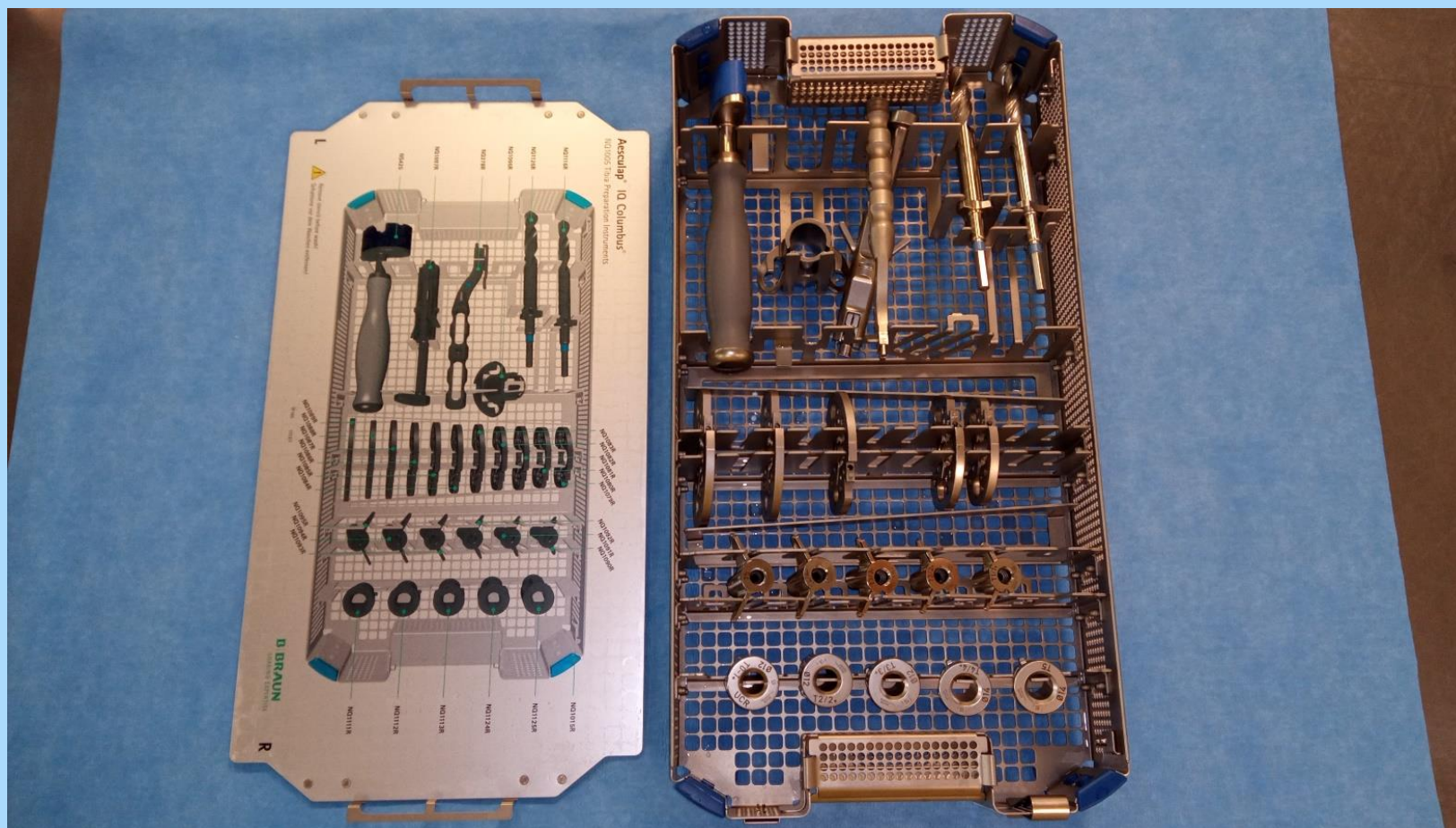

ORT - SADA PROSPACE, INNOVATE OPEN 5 KONTEJNERŮ





PROBLÉMY

Chybějící seznam sady instrumentária – bez nákresu

Chybějící nástroje

Seznam v cizím jazyce

Chybí zaškolení jak rozložit nástroj / někdy ani nevíme, že se dá rozložit/

SIRHMI190 Porte Tige MISS SOCORE
MISS Rod Holder




SIMPTA226 Porte Tige Articulé MISS SOCORE
Articulated Rod Holder



SIJ206 Jauge Insertion Tige SOCORE
Jauge Setting Rod



SIBCD230 Dispositif pour Compression-Distraktion MISS
Compression-Distraktion Device

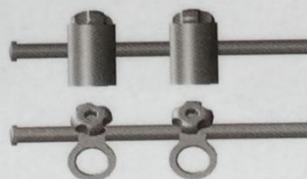


SIMA199 Anti torque MISS SOCORE
Counter Torque MISS



SIPMI188 Persuader MISS SOCORE
Persuader Standard



SIPMO189 Persuader MISS SOCORE ouverture Latérale
Persuader Lateral Opening

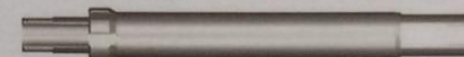

SIEB200 Ecarteur Branches Persuader SOCORE
Persuader Blades Retractor



SISMI192 Tournevis Persuader MISS SOCORE
MISS Persuader Screwdriver




SITCL196 Tournevis Canulé Long MISS SOCORE
Long Cannulated Screwdriver MISS



SICL197 Cylindre pour Tournevis Long SOCORE
Cylinder for Long Screwdriver



SIMTI227 Mesureur de tige MISS SOCORE
Rod Measurer MISS

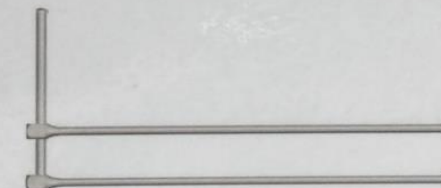


SIGIT228 Guide d'introduction de tige SOCORE
Rod Insertion Guide



ENNOVATE® OPEN SET CONFIGURATION


SZ200 - ENNOVATE® OPEN SET IMPLANTATION

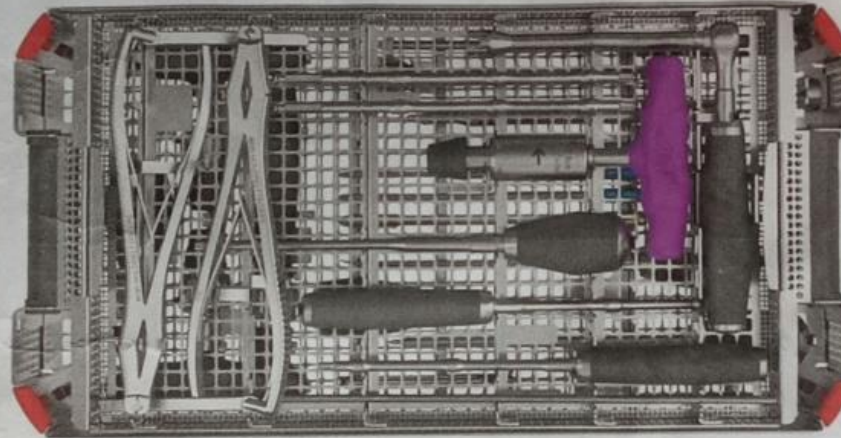

KONT. 1

Trays / Container		
SZ201R	Ennovate Tray Open Implantation	1
JA455R	Lid for Aesculap OrthoTray DIN w/o handle	1
Graphic Template / Packing Stencil		
TF311	Graphic Template for SZ201R (SZ200)	1
TF291	Packing Stencil for SZ201R (SZ200)	1
Container		
JK444	Bottom for 1/1 Container heighth:187mm	1
JK485	Full-Size Lid w/Retention Plate Red	1
JG785B	Identification Label (13 Letters) Red - ENNOVATE OPEN	2
JG785B	Identification Label (13 Letters) Red - IMPLANTATION	2
Instruments - K-Wires		
SZ370	Ennovate MIS K-Wire, Short, Nitinol	12
SZ204R	Ennovate K-Wire Tray	1

Instruments - Upper Layer		
SZ228R	Ennovate Torque Wrench Handle, 10Nm	1
SZ267SU	Ennovate Rod Template, 300mm	1
SZ272R	Ennovate Rod Holding Forceps	2
SZ273R	Ennovate Rod Pusher	1
SZ280R	Ennovate Set Screw Driver	2
SZ282R	Ennovate Counter Torque L-Handle	1
SZ391R	Ennovate Set Screw Driver, Short	2

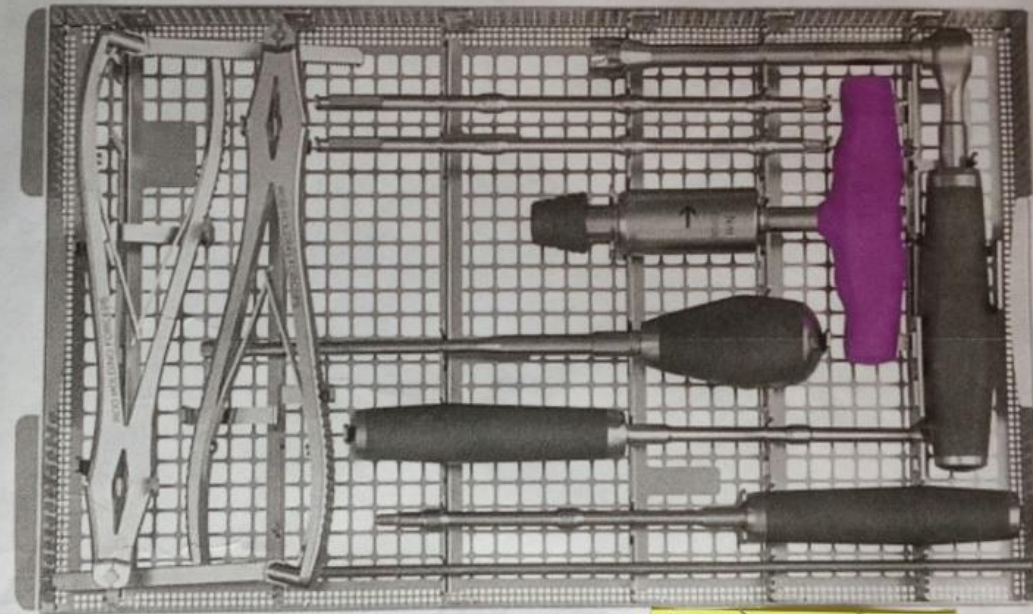

Illegible JINE
(NE PREVIOUS) 2/6/20

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

Heiderose Auchter & Denis Ricci


Product Manager Spine Surgery

Global Marketing Degenerative Spinal Disorders

Click for solutions beyond fusion: www.bbraun.com/ennovate

ENNOVATE® OPEN SET CONFIGURATION

SZ250 - ENNOVATE® SET OPEN MANIPULATION / OPTIONAL

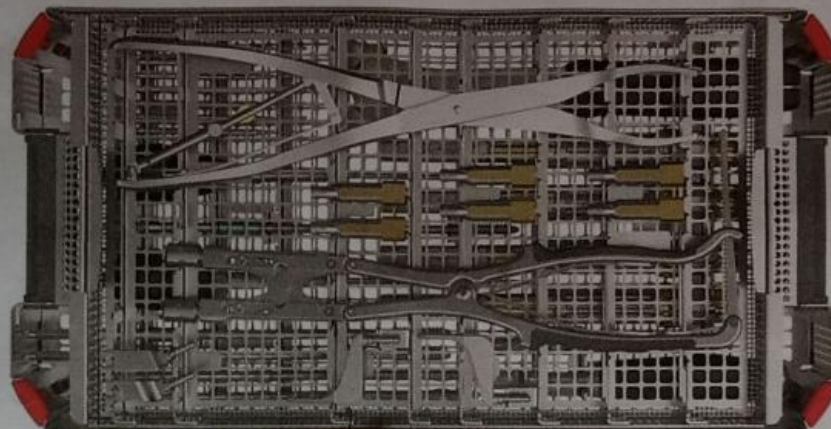


↑ 2ks Komponente
+ 2ks IENI
24/670 K0152

Trays / Container		
SZ251R	Ennovate Tray Open Manipulation/Optional	1
JA455R	Lid for Aesculap OrthoTray DIN w/o handle	1
Graphic Template / Packing Stencil		
TF320	Graphic Template for SZ251R (SZ250)	1
TF300	Packing Stencil for SZ251R (SZ250)	1
Container		
JK444	Bottom for 1/1 Container heighth:187mm	1
JK485	Full-Size Lid w/Retention Plate Red	1
JG785B	Identification Label (13 Letters) Red - ENNOVATE OPEN	2
JG785B	Identification Label (13 Letters) Red - MANI./OPT.	2
Consumables		
SR136SU	Ennovate Injection Cannula OPEN	Order separately

SADA TOMOFIX

CHYBĚJÍCÍ NÁSTROJE

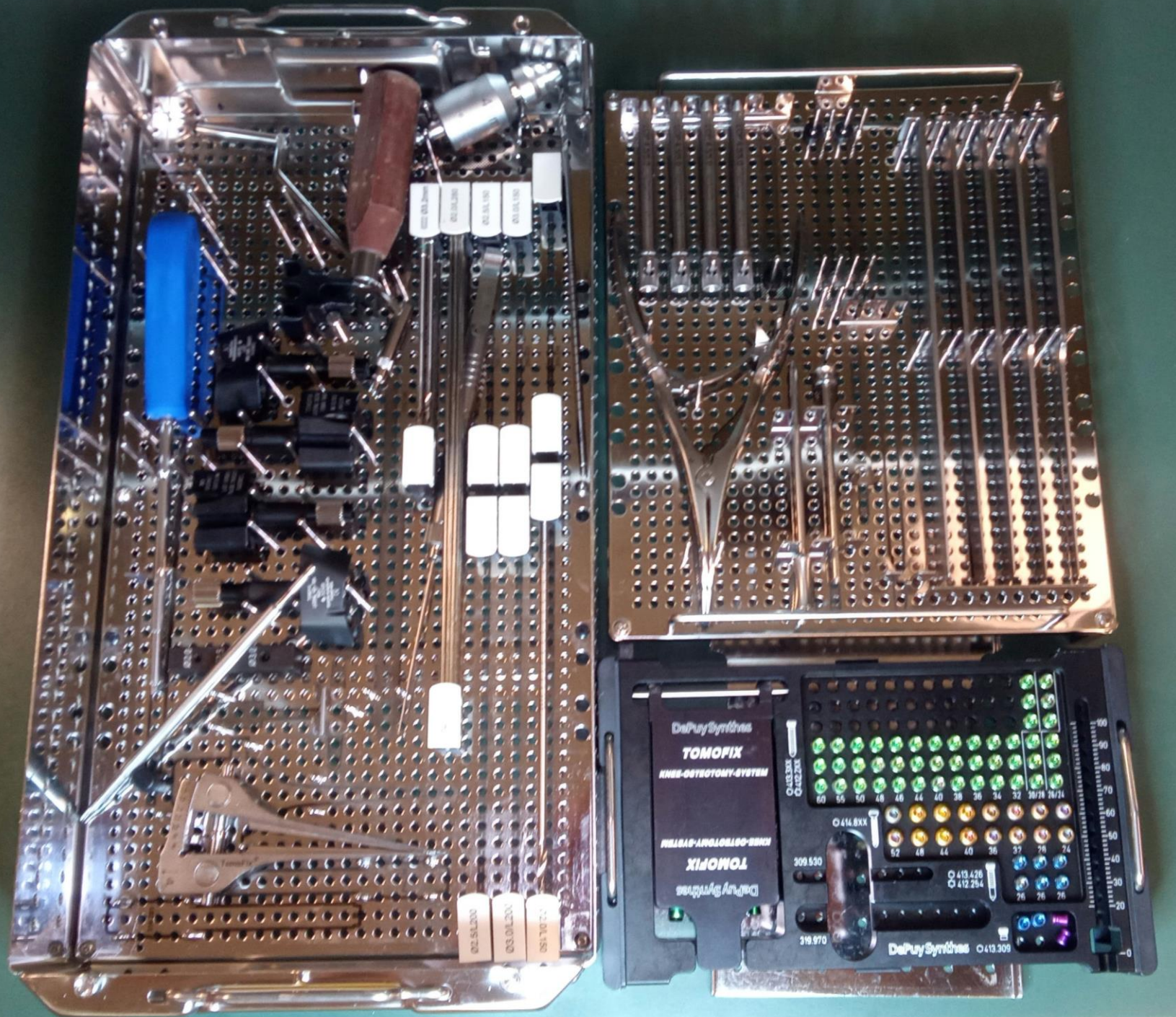

Kdo nese odpovědnost za chybějící nástroje u sad, k nimž nemáme seznam ???

**Pokud není dodán seznam nástrojů
nenese odpovědnost CS !**

Chybí komunikace se zástupci firem

Naše představa spolupráce:

Aktivní přístup zástupců firem s CS u složitých a rizikových sad /mytí, setace/

Zaškolení pracovníků CS - rozložitelné nástroje, kritické nástroje

Dodání seznamů v českém jazyce

POČTY ZPRACOVANÝCH SETŮ V DUBNU-ČERVENCÍ 2021

Zpracované sady instrumentária - zápůjčky 4. - 8. 2021						
OBOR	duben	květen	červen	červenec	srpen	celkem/ 5 měs.
ortopedie	49	97	136	77	85	444
neurochirurgie	10	12	9	4	16	51
chirurgie	4				5	9
celkem	63	109	145	81	106	504

DĚKUJI ZA POZORNOST

